


介護保険レンタル対応 在宅介護用電動ベッド

取扱説明書

レンタル
Rencle

保管用

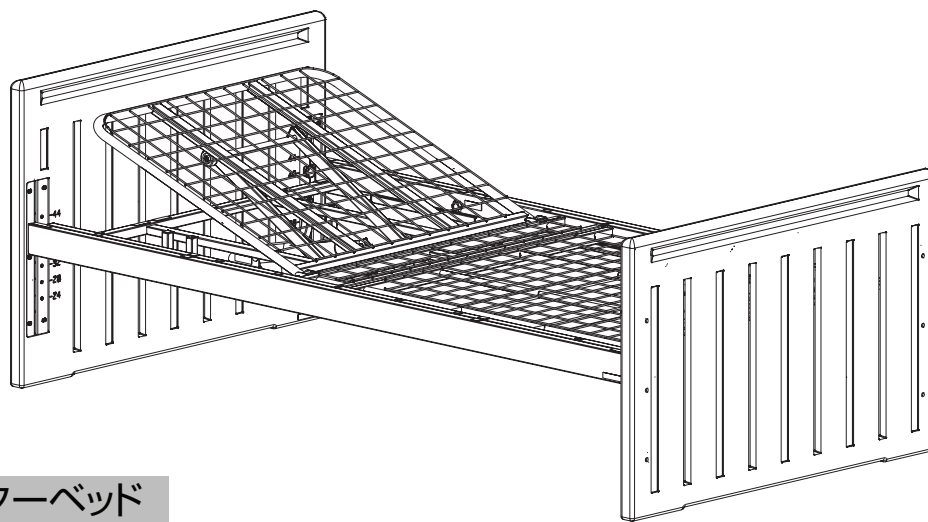

●1モーターベッド PA-9512

このたびは、在宅介護用電動ベッド「レンタル」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ベッドをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- 改良などによりこの「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 製品を他の人に譲渡される場合は、この「取扱説明書」も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

【販売店または、専門業者の方へのお願い】
この「取扱説明書」は必ず療養される方か介護される方へお渡しください。

使用目的・特長

- このベッドはご使用される方の動作を助けること、介護する方の負担を軽くすることを目的として作られたベッドです。
次のような特長があります。



ベッドからの起きあがりに役立ちます。
ベッドのうえでの食事、読書などに便利です。

- 床面高さ6段階調整
ベッドから立ち上がりやすく、すわりやすいように床面までの高さが6段階に調整可能です。
- つたい歩きをサポートするヘッドボード、フットボード形状
ヘッドボード、フットボードの上部にくぼみを設けることで、つたい歩きがしやすくなります。
- サイドレール、ベッド用グリップ取り付け対応
サイドレールやベッド用グリップ（介助バー）の取り付け対応により、立ち上がりや、車いすからの移乗をサポートします。

もくじ

■ 使用目的・特長	1
■ もくじ	2
■ 安全上のご注意	3～5
■ 各部のなまえ	6
■ 手元スイッチの使いかた	7
■ 定期点検とお手入れ	8
■ 故障かな？と思ったら	9
■ 手動での背さげ（停電、故障時）.....	10
■ ベッドの設置について	11
■ ベッドの移動について	12
■ 開梱と部品の確認	13
■ 組立手順	14～19
■ 組立後の点検	20
■ 分解手順	21
■ 仕様／適合周辺機器	22
■ サイドレール、ベッド用グリップの組み合わせ	23
■ 保証とアフターサービス	24
■ 保証書	裏表紙

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくため、また、ご利用者様や他の人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分してます。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 **警告** 人が生命にかかわるけがまたは重傷を負う可能性が想定される内容

 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示
の例：

 記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。

 記号は、**禁止**の行為を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告


必ず守る

- 治療中の方やペースメーカーをご使用の方は、医師に相談の上お使いください。
お使いになる方の症状により、ベッドの背あげによって症状を悪化させるおそれがあります。
- 電源プラグは根元まで確実に差しこんでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
守らないと感電や発熱による火災のおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
守らないと感電やショートして発火の原因となります。
- 動かない場合や、異常を感じたときはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。
守らないと感電や発火の原因となります。


禁止

- ベッドの下にもぐりこんだり、動く部分に頭、脚、腕などを入れないでください。
- サイドレールなどから頭や手、脚を通したままベッドを動作させないでください。
- 背ボトムが水平でない状態ではその上に腰かけないでください。
- 手元スイッチ(リモコン)やモーター部には水などをこぼさないでください。
感電やショート、発火のおそれがあります。

 禁止	●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったりしないでください。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。 ●電源コードや電源プラグがいたんだり熱くなったり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しないでください。 感電やショート、発火のおそれがあります。 ●絶対に分解したり、修理・改造はおこなわないでください。 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。 ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。 ●長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。 ●ベッドの近くでストーブなどの熱器具は使用しないでください。 守らないと変質・変形・火災の原因となります。 ●2人以上で使用しないでください。このベッドは1人用です。 2人以上で使用するとベッドが破損してけがをするおそれがあります。 一時的に介護の方が乗る必要がある場合、ベッドに乗る方の合計体重が138Kgを超えないことを確認してください。 ●安全使用荷重1700N(174kg)をこえないでください。 安全使用荷重とは使用者体重とマットレス、サイドレール、ベッド用グリップなどのベッドに取り付けるものを全て合わせた重さで、1700N(174Kg)をこえるとベッドが破損してけがをするおそれがあります。 ●ベッドが新しいうちは、素材のにおいが気になる場合があります。そのときは、お部屋の換気を十分おこなってください。
---	---

⚠ 注意

 必ず守る	●操作するときは必ず周囲に人やペットなどがいないことを確認してください。 ●手元スイッチが誤って押されないように注意してください。 ●必ずベッドの頭側に頭がくるようにして使用してください。 ●うつ伏せや、横向きに寝た状態で、背あげはしないでください。 守らないと事故やけがの原因となります。 ●サイドレールやベッド用グリップを差し込む穴に、指やものを入れないでください。
 禁止	●ベッドの上で遊ぶ、ベッドの上で飛びはねるなど介護用ベッドの用途以外では使用しないでください。 ●取扱説明書の内容が理解できない方が操作するおそれのある場合は、必ず電源プラグを抜き、必要なとき以外は動作させないでください。 ●マットレスなしでは使用しないでください。守らないと事故やけがの原因となります。 ●ベッドに貼られているシールは、はがさないでください。 ご使用のときの注意および製造番号の表示がされており、はがしてしまうと故障時に的確な対応ができなくなるおそれがあります。

警告

●手元スイッチ操作中は、ベッドのフレームと背ボトムの間などに手(指)や脚などを入れないでください。

→さがってきた背ボトムとベッドフレームやヘッドボードなどの間にはさまれて、けがをすることがあります。

●身体の一部がすき間に入った状態で、手元スイッチの操作をしないでください。

→すき間にはさまれて、けがをすることがあります。

→特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

●ベッドと壁や周りのものとのすき間にはさまれないように注意してください。

→身体の一部がはさまれて、けがをすることがあります。

→特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

●ベッドに直接取り付けて使用するサイドレール、ベッド用グリップ、マットレスなどは弊社が指定する適合品をお使いください。

→指定以外の製品や他社製品と組み合わせると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりベッドが故障することがあります。

(22ページ「適合周辺機器」、23ページ「サイドレール、ベッド用グリップの組み合わせ」参照。)

警告

●以下のすき間に注意してください。

→ベッドやサイドレール、ベッド用グリップなどにはすき間があります。さらに、サイドレールやベッド用グリップなどをベッドに組み合わせるとすき間ができます。これらのすき間に、身体の一部(特に頭や首など)がはさまれてけがをすることがあります。

下記の項目に注意してください。

→特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。


- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ①サイドレールなどの内部のすき間 | ⑤サイドレールなどとフレーム、マットレスのすき間 |
| ②2本のサイドレールなどの間のすき間 | (幅方向) |
| ③サイドレールなどとボードのすき間 | ⑥ボードとマットレスのすき間 |
| ④サイドレールなどとフレーム、マットレスのすき間(高さ方向) | ⑦あがっている背ボトムとヘッドボード、サイドレールなどのすき間 |
| | ⑧ヘッドボード、フットボードとフレームのすき間 |

●サイドレールなどの突起物に衣類などがからまないように注意してください。

→衣類などがからまった状態でベッドを操作すると、衣類などが引っばられるなどして、けがをすることがあります。

→ベッドの乗り降りなどの際に転倒して、けがをすることがあります。

各部のなまえ

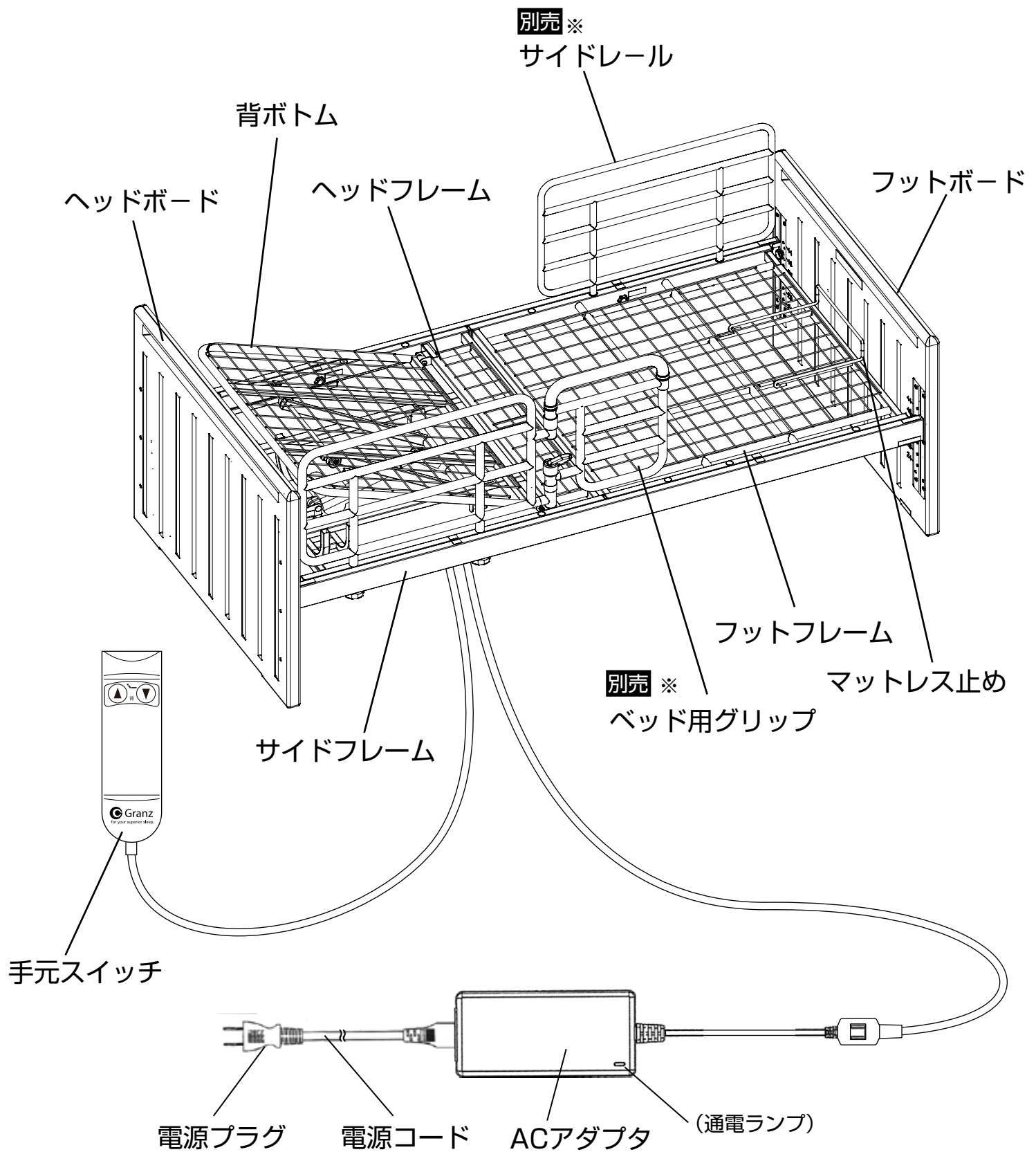

※別売品に関しては、22ページの「適合周辺機器」をお読みください。

手元スイッチの使いかた



注意




禁止

- 必ず組立後の点検をおこなってからご使用ください。
- 2分以上の連続使用はおこなわないでください。
故障の原因となるおそれがあります。




背をあげる・さげる

- 食事やテレビなどを見るときに使ったり、起きあがるときに使ってください。
- 身体が正しい位置(背ボトムの曲がる位置)に腰があることを確認してください。

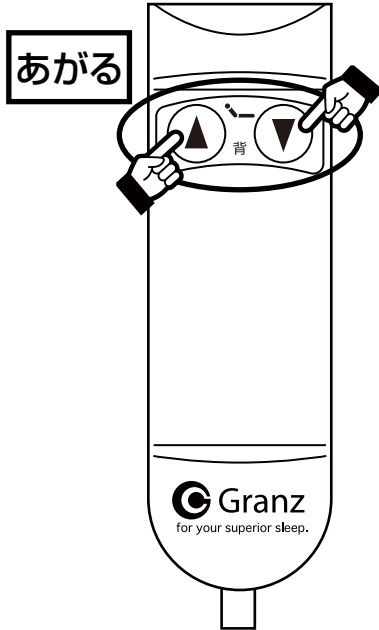

さがる

お好みの角度になるまで
押し続けてください

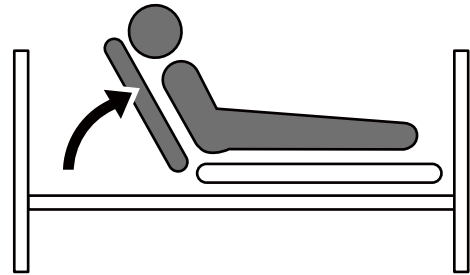

警告



禁止

- 頭、脚、腕などをサイドレールなどから出したまま使用しないでください。
- 身体がうつ伏せや横向きの状態で背をあげないでください。
- 背をあげるときには必ずベッド上のテーブルなどに
身体がはさまれることのないようご注意ください。

定期点検とお手入れ


定期点検

- 安全にご使用いただくために、1ヶ月に1回は定期的に点検してください。
ご使用の回数や環境などにより、製品は摩耗・劣化が進みます。
定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。
※点検項目は20ページ「組立後の点検」をお読みください。
- 異常が認められた場合やくわしい点検をご希望されるときは、販売店へご連絡ください。

お手入れ

マットレス

マットレスの取扱説明書
をお読みください。

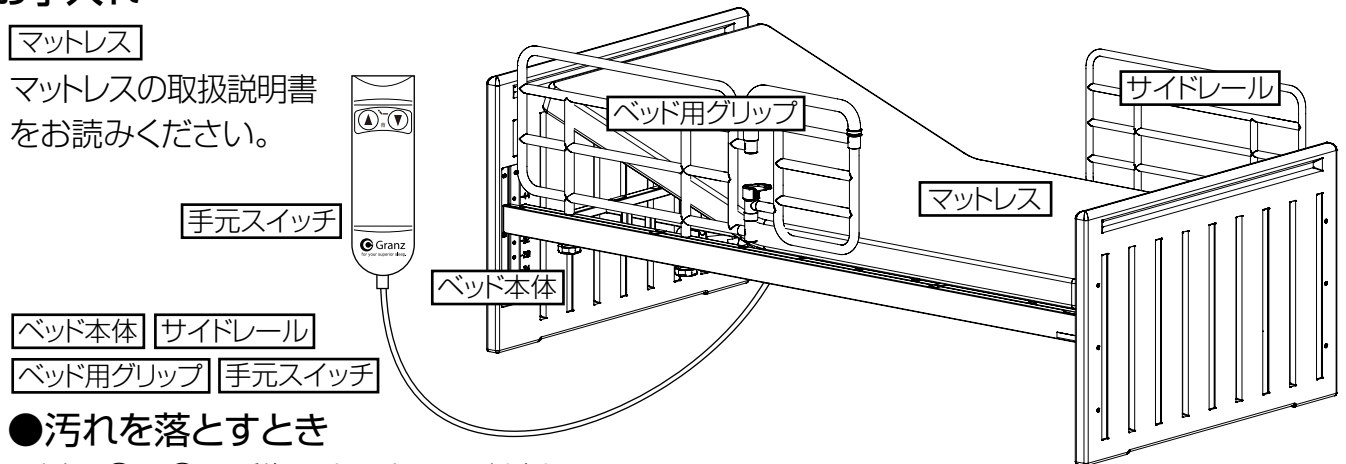

●汚れを落とすとき

以下①～③の手順でおこなってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼってふきます。
- ②水でひたした布をよくしぼって洗剤分をふきとります。
- ③乾いた布で残った水分を十分ふきとり、水分を残さないようにします。

●消毒するとき

以下の消毒剤を指定の濃度または消毒剤の取扱説明書にもとづきご使用ください。

・消毒用エタノール ・オスバン ・ハイアミン ・ヒビデン ・ミルトン

※オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応していません。

警告

- お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
→抜かないと感電のおそれがあります。
- ベッドに水をかけて掃除しないでください。
→ショートのおそれがあります。

注意

- シンナー、ベンジン、ガソリン、クレゾールは使用しないでください。
→変色・変質のおそれがあります。
- 消毒剤は指定以外の薬品を使用しないでください。
→破損・変質のおそれがあります。
- 中性洗剤のふき残しがないようにしてください。
→変色や樹脂の部分が割れるおそれがあります。
- ベッドのお手入れの際はベッドの突起部分でけがをしないように注意してください。

故障かな？と思ったら


- 故障ではない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度以下の項目を確認してください。
- 確認・処理をしても正常に動作しない場合は、ただちにベッドの使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、販売店に修理をご依頼ください。
- 以下の症状により、電動で背さげができない場合は、手動で背さげをおこなってください。（次ページをお読みください。）
- 地震、火災、水害などで被災したベッドは、販売店に点検修理をご要望ください。電装品のショートや漏電による感電、火災、ベッドの変形による動作異常により、けがをする可能性があります。

症状	確認	処置
動かない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセント(AC100V)に差しこんでください。
	電源プラグが破損していませんか？	販売店にご相談ください。
	手元スイッチのコードが抜けていませんか？	手元スイッチのコードを差しこんでください。
	ブレーカーが落ちていませんか？	ブレーカーを確認してください。
	コンセントに電流はきていますか？	コンセントに他の電気器機のプラグを差しこんで確認してください。
	長時間連続で操作していませんか？ (モーターが過熱すると保護機能が働き、動作が停止する場合があります。)	モーターの過熱防止のため、20～30分してから操作してください。
十分な、角度まで動作しない	動くところに何かはさまっていませんか？	はさまっているものを取りのぞいてください。
サイドレール、ベッド用グリップがぐらつく	しっかりと差しこまれていますか？ ベッド用グリップの固定ねじはしっかりとしまっていますか？	しっかりと差しこみ、ベッド用グリップは固定ねじを確実にしめてください。


手動での背さげ（停電、故障時）

停電時や故障により、背ボトムがさげられなくなった場合、以下の手順により手動でさげることができます。

- ①電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②寝具、マットレスをベッドからおろしてください。
作業の支障となるサイドレールまたはベッド用グリップがあるときは取りはずしてください。
- ③作業は2人でおこない、1人の方が背ボトムとモーターをしっかりと手で持って固定します。
- ④もう1人の方が背ボトムとモーターを連結している連結ピンからスナップピンを取りはずした後に連結ピンを引き抜きます。（下図参照。）
連結ピンが引き抜かれると背ボトムとモーターが固定されなくなりますので、背ボトムとモーターを手で持ってゆっくりとさげてください。

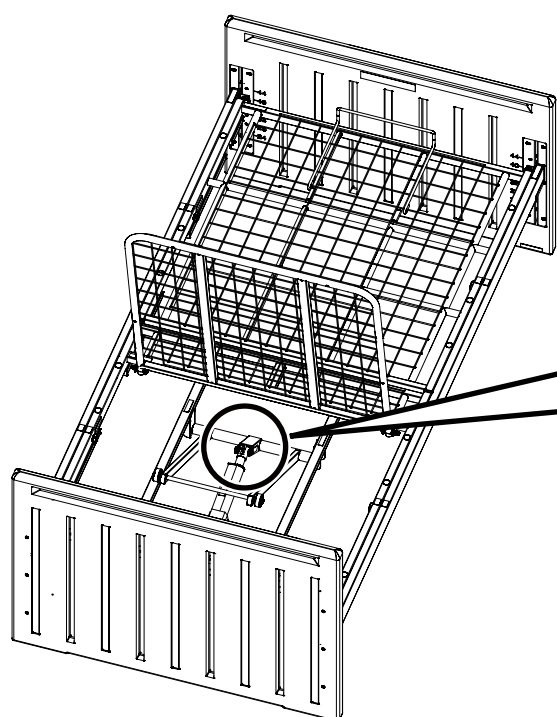

- ⑤もとに戻すときは背ボトムとモーターの位置を合わせ、樹脂ブッシュと連結ピンを差しこんだ後にスナップピンを差しこんでください。

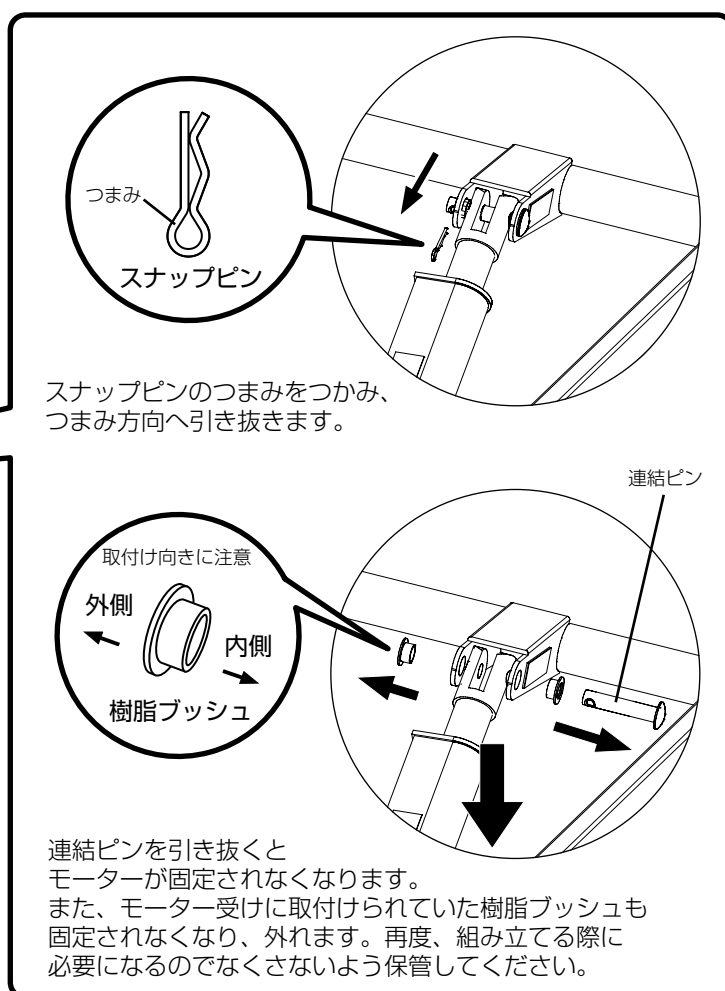

 注意	 必ず守る	●作業は2人以上でおこなってください。 1人でおこなうと手や腕をはさまれ、けがをするおそれがあります。 ●スナップピンを抜くときに指などに刺さらないように注意してください。 また、はずしたスナップピンと連結ピン、樹脂ブッシュはなくさないよう保管してください。
	 禁止	●この作業をおこなったときは復帰後もとに戻すまで電源プラグをコンセントから抜いたままにしてください。

ベッドの設置について

●ベッドを設置するときは以下の項目に注意してください。

一度組立ててしまいますと、部屋の中での移動、向きの変更が困難な場合があります。

警告

●電源プラグの抜き差しができなくなる場所にはベッドを設置しないでください。

- ・誤操作を防止するために、電源プラグを抜くことが必要になる場合があります。
- ・誤操作により、けがをするおそれがあります。

●ベッドの電源は直接コンセントからとってください。

- ・コンセントや延長コードの容量をこえる電気製品を同時に接続して使用すると、電源コードや電源プラグが発熱して火災のおそれがあります。

注意

●ベッド周辺の空間を確保してください。

- ・ベッドを使用する方がベッドから起きあがる場合に、ベッドの左右どちら側からの乗り降りが可能か、車いすをご使用の場合は、ベッドのどちら側で使用するかによって必要な空間を確保してください。
→壁やものなどを傷つけるおそれがあります。
- ・介護する方がベッドまわりで介護するための空間をどれだけ必要か(シーツ交換だけか、おむつ交換、着替え、洗髪、歯磨き、食事の介助などが必要かどうかによって、ベッドの周囲をどれだけあけるか)よくお考えください。

●故障の原因となりますので、次のような場所への設置はさけてください。

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| ・直射日光のあたる場所 | ・冷暖房による冷気や暖気が直接あたる場所 |
| ・換気の悪い場所 | ・過度の水蒸気や油蒸気のかかりやすい場所 |
| ・振動や衝撃のある場所 | ・高温、多湿、低温、乾燥した場所 |
| ・床が水平でない場所 | ・ほこり、煙、塩分、イオウ分、腐食性物質などの多い場所 |


●ベッド使用時に床にかかる荷重に耐えられる場所に設置してください。

- ・ベッドの質量約60kgに寝具やサイドレール、ベッド用グリップおよびベッドを使用する方の体重を加えた総質量がベッド使用時に床にかかる荷重となります。
この荷重に耐えられる場所に設置してください。→床が破損するおそれがあります。

ベッドの移動について

●組立後にベッドを移動する場合は、下記の手順で作業をおこなってください。

- 1.作業人員はベッドが重量物(60kg程度)であるため、必ず2人以上でおこなってください。
- 2.移動前には必ず、サイドレール、ベッド用グリップ、マットレス、マットレス止めなどは取りはずしてください。
- 3.電源プラグを抜き、ACアダプタや手元スイッチのコード類が引っかからないようにしてください。
- 4.人が乗った状態や荷物をのせた状態での移動は、絶対おこなわないでください。
- 5.移動前には必ず、ヘッドボード、フットボードとサイドフレームを固定するノブボルト(16ページ参照。)が確実に取り付けられていることを確認してください。
→ケガ、破損等の原因になることがあります。
- 6.ベッドを持ち上げる場合は、下図のAの位置を一人が両手で持つようにしてください。

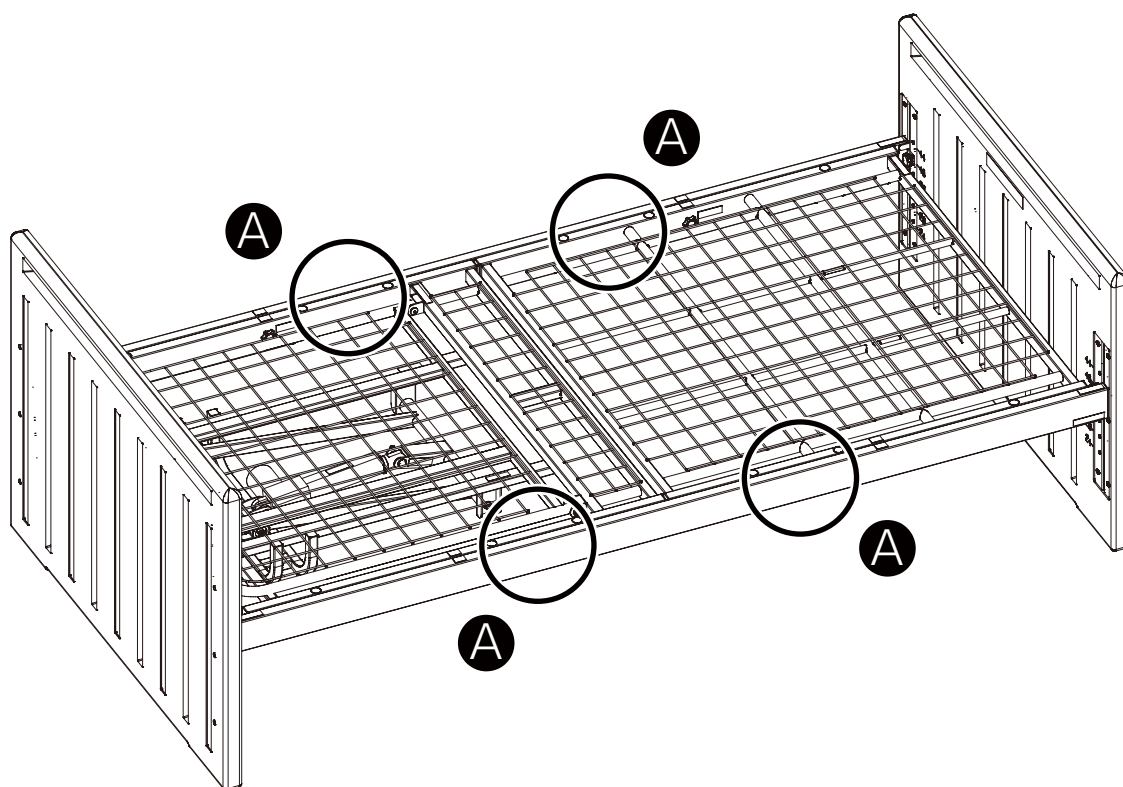

 注意	 必ず守る	●上図の位置以外を持って持ち上げないでください。 ベッドが破損するおそれがあります。 ●人が乗った状態や荷物をのせた状態での移動は、絶対おこなわないでください。ベッドが破損して、けがをするおそれがあります。
--	--	---

開梱と部品の確認

●開梱後に以下の部品がすべてそろっていること、破損していないことを確認してください。
万一、部品の不足・破損があった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

**梱包箱
(4-1)**

取扱説明書、
保証書(本書)×1
ヘッドフレーム×1
・背あげ用モーター×1
・手元スイッチ×1
・ACアダプタ×1
・電源コード×1

ヘッドフレーム(PA-9512HFM)

レンクル1モーター ヘッドフレーム

品番 PA-9512HFM ロット番号

ロット番号シール

付属品

ノブボルト(小)×4

ワッシャー×8

ノブボルト(大)×4

マットレス止め×1

**梱包箱
(4-2)**

フットフレーム×1

フットフレーム(PA-9512FFM)

ロット番号シール

レンクル1モーター フットフレーム

品番 PA-9512FFM ロット番号

**梱包箱
(4-3)**

サイドフレーム×2

サイドフレーム(PA-9512SFM)

ロット番号シール

レンクル1モーター サイドフレーム

品番 PA-9512SFM ロット番号

**梱包箱
(4-4)**

ヘッドボード×1
フットボード×1

ヘッドボード／フットボード(PA-9512HBD/FBD)

警告シール

ロット番号シール

ロット番号シール

ロット番号シール

ロット番号シール

レンクル1モーター ヘッドボード

品番 PA-9512HBD ロット番号

レンクル1モーター フットボード

品番 PA-9512FBD ロット番号

注意

必ず守る


- 開梱にあたり、カッターを使用するときは内部の部品を傷つけないよう注意してください。
- また、カッターで手や指を切らないようにしてください。
- ダンボールの切りはしで指を切るおそれがあるのでご注意ください。
- ダンボールなどの梱包材の廃棄方法は、地方自治体の規則によって異なります。お住まいの地方自治体の条例にしたがって処分してください。
- 以上のことを守らないと事故やけがのおそれがあります。

13

組立手順


- 組立作業は販売店、または専門業者に依頼されることをおすすめします。

 注意	 必ず守る	●重量のあるユニットを組立てたり移動するときは、2人以上でおこなってください。背や腰などを痛めるおそれがあります。 ●組立の際には、部品どうしや部品の可動部で手や指をはさまないように、注意してください。 ●ネジの締め付けはしっかりとってください。 ●部品を固定している連結ピンなどははずすときは部品を手でささえてください。ささえていないと部品が落下し、破損、けがをするおそれがあります。
--	---	---

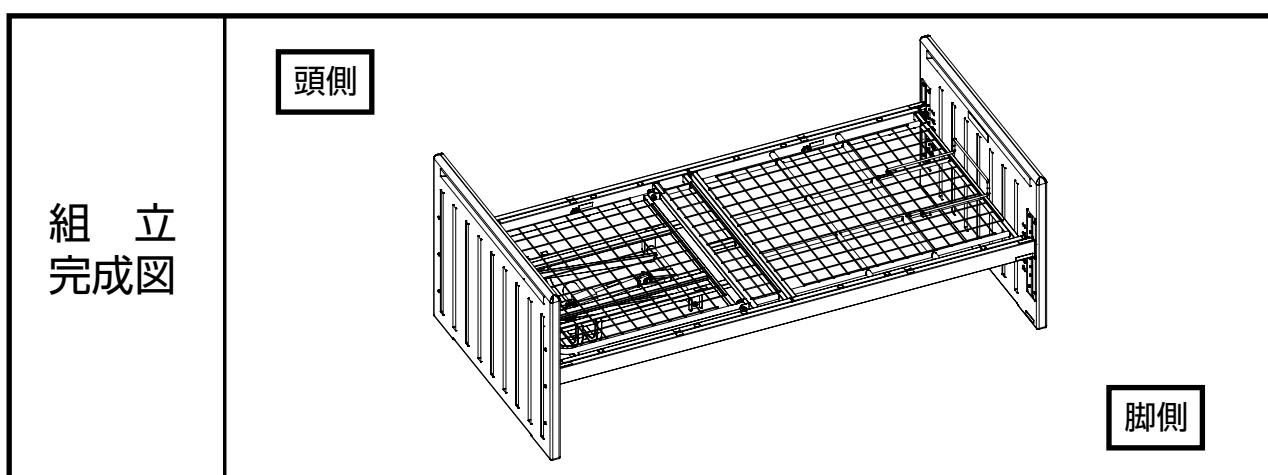

●組立手順の概要

- ①床面高さの設定
- ②サイドフレームの組立
- ③ヘッドフレーム、フットフレームの組立
- ④サイドフレームのノブボルトの締め付け
- ⑤マットレス止めの取り付け

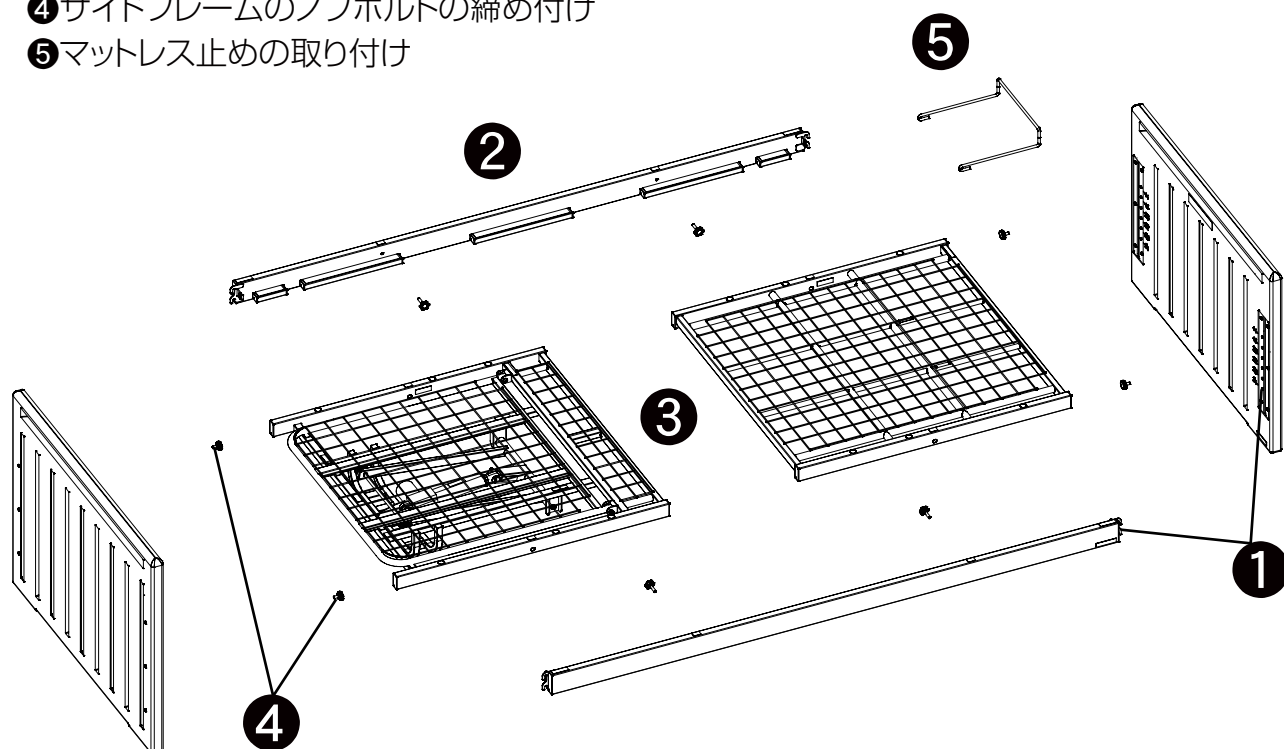

1

床面高さの設定

この商品は、床面の高さが6段階に選べるベッドです。
組立の前に以下の説明をお読みいただき、床面高さを設定してください。

図1と図2のように、
6段階の床面高さが
選べます。お好みの高さ
に合わせて、床面高をお選
びください。

横から見た図

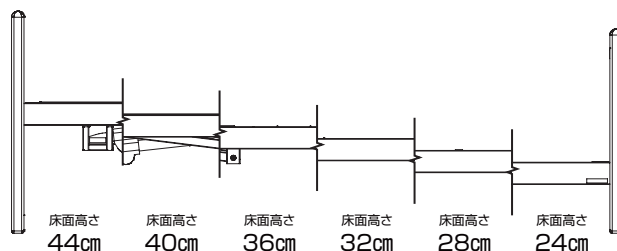


図1


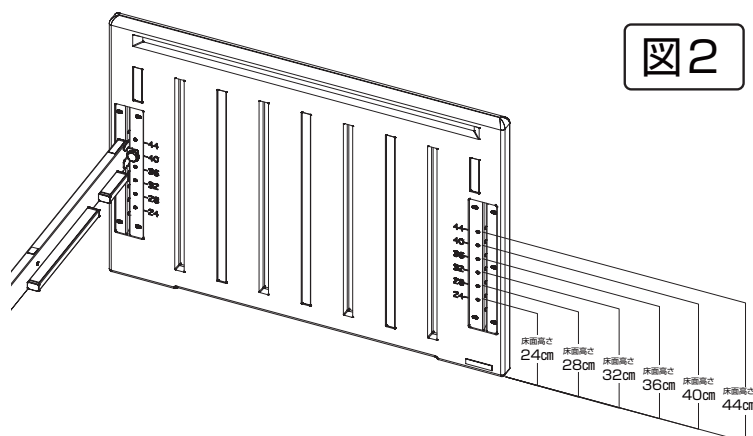


図2

上記の設定をおこなってもマットレスの
厚みや脚の長さの個人差によりちょうど
良い高さにならない場合もありますので
サイドフレームの位置を調整してちょうど
良い高さになるようにしてください。

【ちょうど良い高さの目安】

- ①膝が90°になる。
- ②足裏(かかと)が床に接地する。

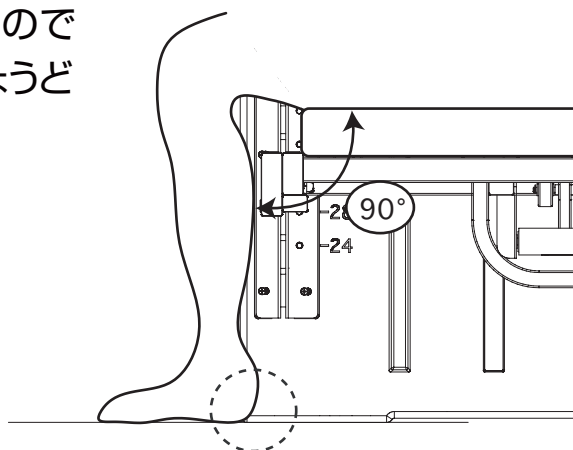

警告



必ず守る


- 床面を高くしすぎないでください。
ベッドの乗り降りのときに転倒してけがをするおそれがあります。
- ノブボルトはしっかり締めてください。
しっかり締めないとサイドフレームがはずれて重大なけがをするおそれがあります。
- ノブボルトを締める穴の位置はサイドフレーム2本とも同じ位置にしてください。
違う位置にするとベッドが破損して、けがをするおそれがあります。

2


サイドフレームの組立

ヘッドボード、フットボードとサイドフレームを以下のとおり組立ます。

- ①ヘッドボードの溝にサイドフレームをしっかりと差し込みます。
- ②ヘッドボードとサイドフレームのネジ穴を合わせてワッシャーを通した
ノブボルト(小)を取付けて、しっかりと締めてください。
- ③ヘッドボードと同様にフットボードの溝にサイドフレームをしっかりと
差し込み、ワッシャーを通したノブボルト(小)を取付けて、**仮止め**
してください。

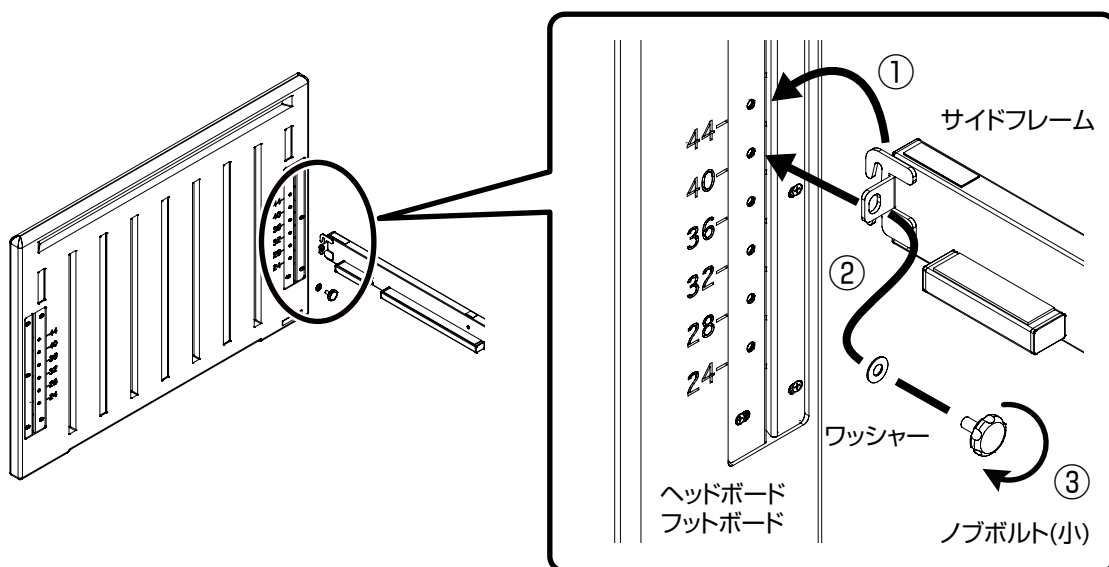

- ④ ①～③と同様に反対側のサイドフレームも組み立ててください。

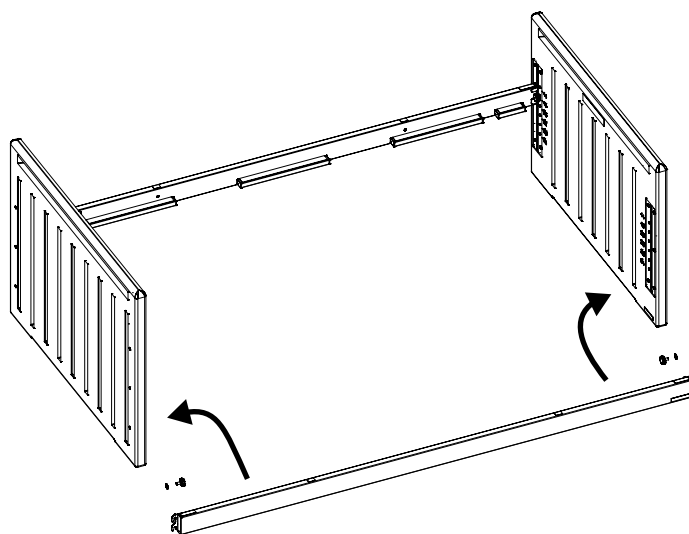

注意

必ず守る


●必ず、サイドフレームの高さをあわせてください。あわせないとベッドが破損して、けがをするおそれがあります。

3

ヘッドフレーム、フットフレームの組立

ヘッドフレームとフットフレームを以下のとおり組立ます。

- ①ヘッドフレーム、フットフレームを向きに注意しながらフレームに乗せてください。

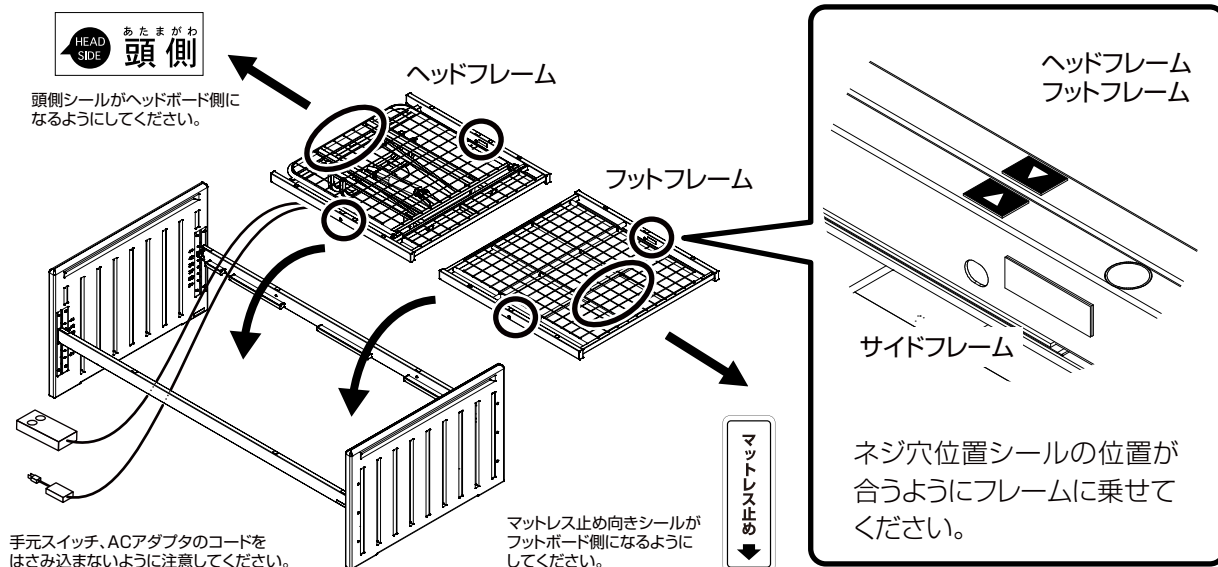


注意


必ず守る

- ヘッドフレーム、フットフレームを乗せる向きを間違えないでください。間違った向きで組立てるとベッドが破損して、けがをすることがあります。



- ②ヘッドフレーム、フットフレームとサイドフレームのネジ穴を合わせてワッシャーを通したノブボルト(大)を取付けて、**仮止め** してください。

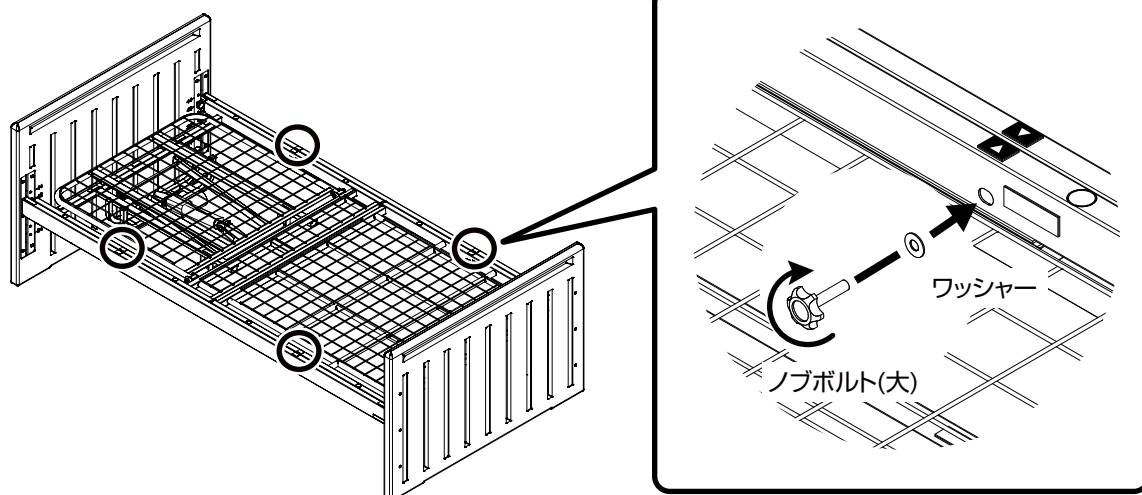

- ③サイドレールを中央の差し込み穴に差し込んでください。
穴の位置が合わず、差し込みにくい時はヘッドフレーム、
フットフレームの位置を調整してください。

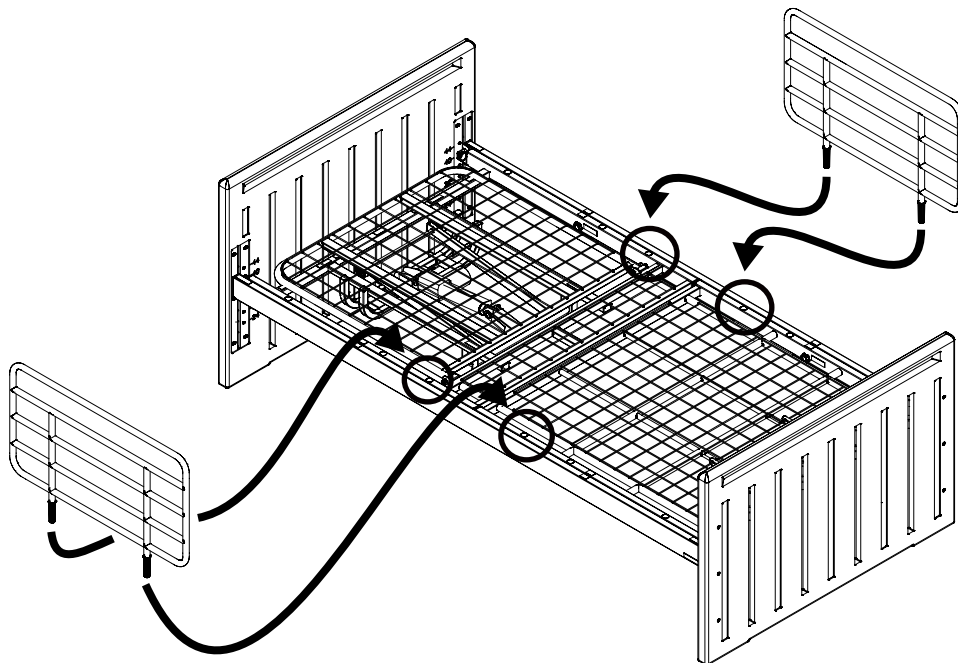

- ④サイドレールが差し込めたら②で仮止めしたノブボルト(大)を
しっかりと締めてください。

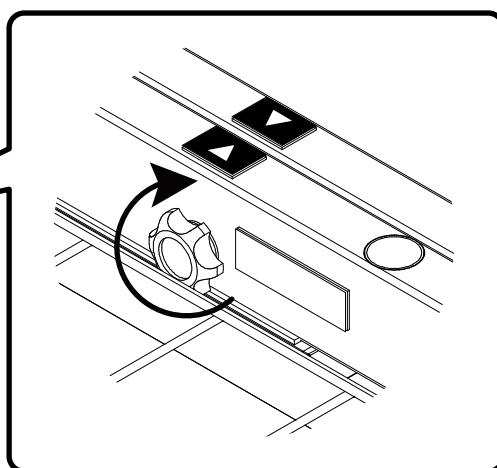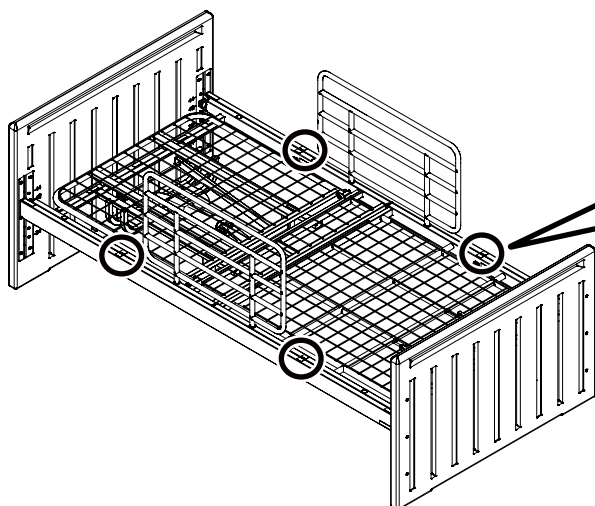


注意




必ず守る

- ノブボルトはしっかり締めてください。
ゆるんでいるとベッドのガタツキや破損の原因となります。

4

サイドフレームのノブボルトの締め付け

16ページで仮止めしたノブボルト(小)をしっかりと締めてください。

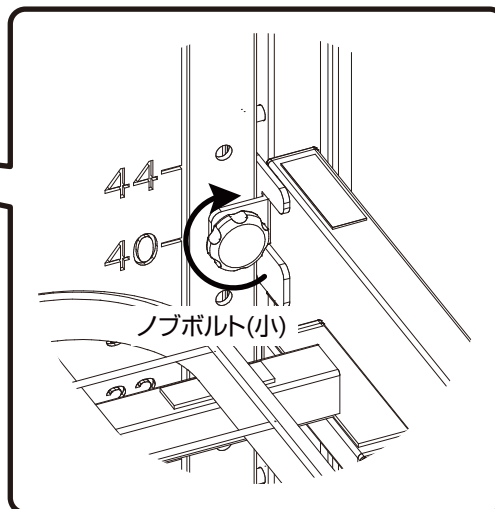
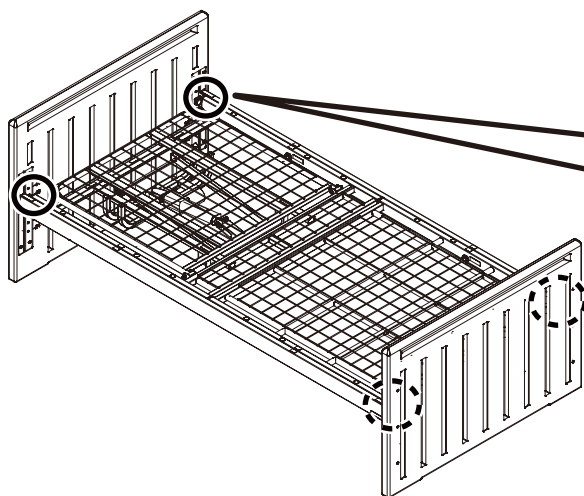


- ノブボルトはしっかりと締めてください。
ゆるんでいるとベッドのガタツキや破損の原因となります。

5

マットレス止めの取り付け

マットレス止めをフットボード側に引っ掛けてください。
フットフレームの中心位置になるように5本目のメッシュワイヤーに
引っ掛けてください。

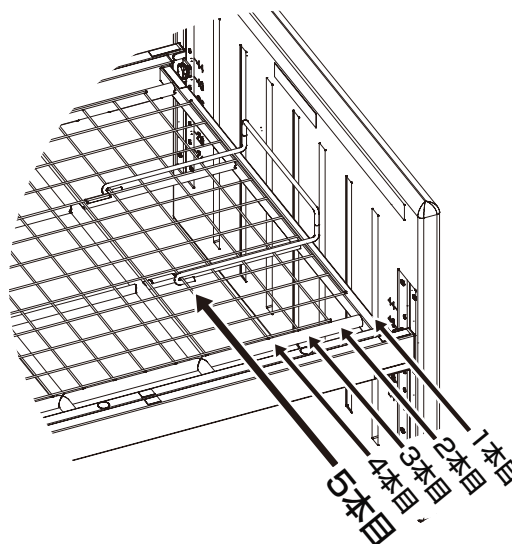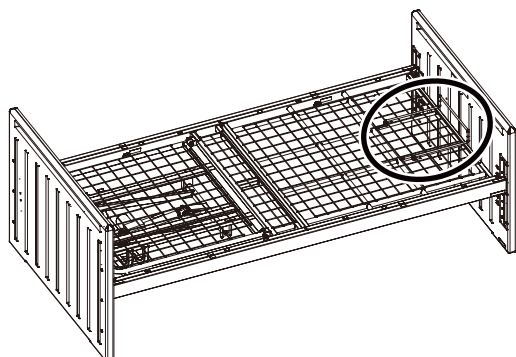

- マットレス止めは上図の位置以外に取り付けしないでください。
上図以外の位置に取り付けるとマットレスがずれるおそれがあります。

組立後の点検

- ベッドの組立が終了しましたらベッドに人が乗っていない状態で以下の点検項目を確認してください。また、定期点検のときにも、このリスト使用してください。
(このリストをコピーしてお使いください。)

 注意	 必ず守る	●組立後の点検は必ず実施してください。 組立が不十分な状態で使用するとけがや故障のおそれがあります。
	 禁止	●掃除・点検などでベッドの下に入るときは必ず電源プラグを抜いてください。 誤動作などによりベッドにはさまれ、重大な事故になるおそれがあります。

- 点検作業を実施しているときに異常な音や振動などの不具合が生じたときは、すぐにベッドの使用を中止して販売店までご連絡ください。

1	床面高さの設定: 床面の高さはちょうど良い高さになっていますか？ ノブボルトはしっかり締まっていますか？ ノブボルトが締まっている穴の位置はサイドフレーム2本とも同じ位置ですか？	☐ はい ☐ いいえ ☐ はい ☐ いいえ ☐ はい ☐ いいえ	15ページの組立手順①参照。
2	サイドフレームの組立: サイドフレームはヘッドボード、フットボードの溝にしっかりと差し込まれていますか？ ノブボルトはしっかり締まっていますか？	☐ はい ☐ いいえ ☐ はい ☐ いいえ	16ページの組立手順②参照。
3	ヘッドフレーム、フットフレームの組立: ノブボルトはしっかり締まっていますか？	☐ はい ☐ いいえ	17ページ、18ページの組立手順③参照。
4	マットレス止めの取り付け: マットレス止めは指定の位置に取り付けられていますか？	☐ はい ☐ いいえ	19ページの組立手順④参照。
5	電源: 電源プラグをコンセントに差しこんだときにACアダプタの通電ランプは緑色に点灯していますか？	☐ はい ☐ いいえ	
6	使用方法: 手元スイッチ(リモコン)のボタンを押すと、背あがは正しくスムーズに動作しますか？	☐ はい ☐ いいえ	7ページの「手元スイッチの使い方」参照。
7	モーターの動作音: モーターを動かしたときの音に異常はありませんか？	☐ はい ☐ いいえ	
8	配線の確認: ケーブルがフレームや可動部にはさまれたり、引っかかったりしていませんか？	☐ はい ☐ いいえ	

分解手順

●分解作業は販売店、または専門業者に依頼されることをおすすめします。

 注意	 必ず守る	●重量のあるユニットを分解したり移動するときは、2人以上でおこなってください。背や腰などを痛めるおそれがあります。
	 必ず守る	●分解の際には部品どうしや部品の可動部で手や指をはさまないように、注意してください。けがをするおそれがあります。
	 禁止	●分解の前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ショートして部品が破損したり、感電のおそれがあります。

1.背ボトムの角度は手元スイッチの操作にて、1番下までさげた状態にしてください。
→背ボトムが動いてけがをするおそれがあります。


2.分解の手順は以下のとおり、組立手順の逆でおこないます。

14ページからの組立手順の各項目を参照し、逆の手順にて分解してください。

※取りはずしたノブボルト、ワッシャーはなくさないようにしてください。

●分解手順の概要

- ① マットレス止めの取り外し
- ② ヘッドフレーム、フットフレームの取り外し
- ③ サイドフレームの取り外し

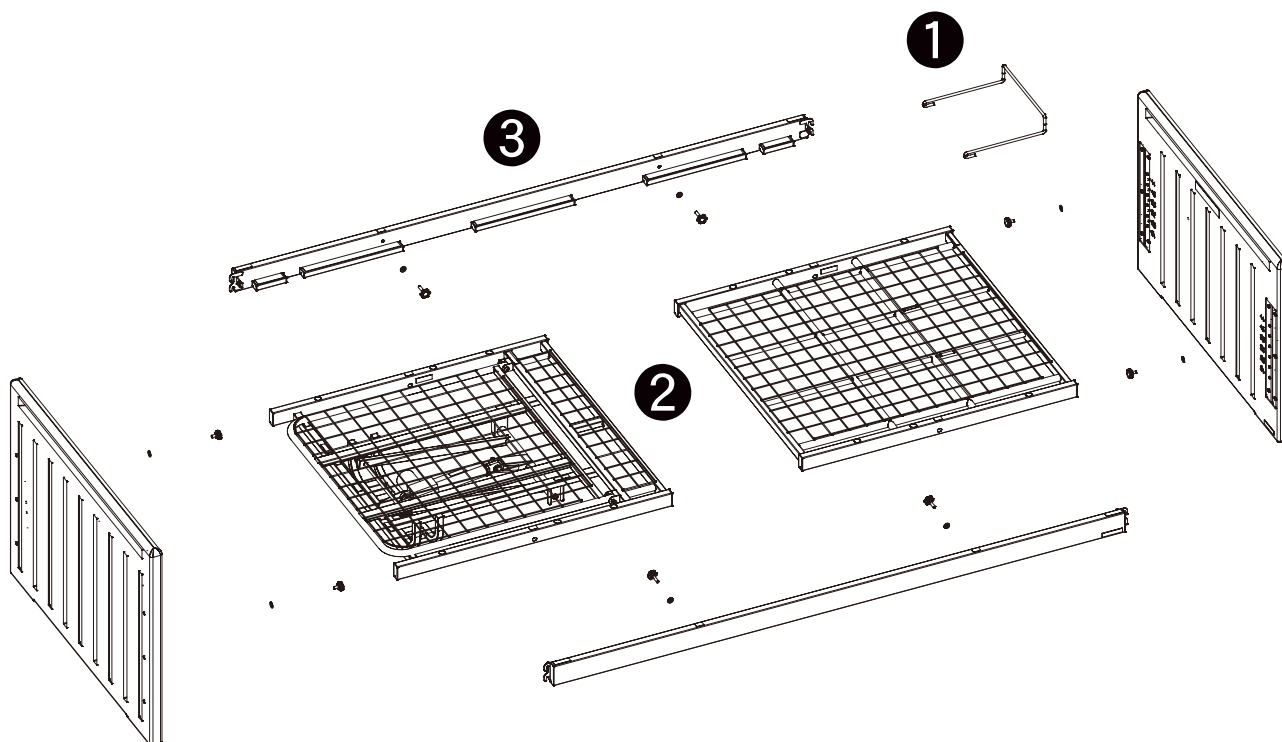

仕様

品名	レンクル 1モーターベッド
品番	PA-9512
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	110W (安全使用荷重負荷時)
安全使用荷重	1700N(約174kg) (最大使用者体重138kg)
質量	58kg
動作	背あげ 0~72°
主な材質	ヘッドフレーム、フットフレーム、サイドフレーム: スチール、樹脂 ヘッドボード、フットボード: ポリエチレン樹脂、スチール
生産国	中国
ベッド寸法 (単位=cm)	

※この「取扱説明書」に記載されている数値には多少の誤差が含まれています。表記を見やすくするため、約、およそ、といった言葉を省略しています。

適合周辺機器

 警告	 必ず守る	●適合周辺機器に明記されたもの以外は使用しないでください。意図せぬすき間の発生や製品の破損・変形などによりけがのおそれがあります。 ●必ず適合周辺機器の取扱説明書または注意書きをお読みください。誤動作などによりベッドにはさまれ、重大な事故になるおそれがあります。
---------------	-----------------	--


サイドレール	サイドレールR DB SR-01R DB
ベッド用グリップ	ベッド用グリップ2 BG-03 DB
マットレス	適合マットレス: MT-02、MT-09 サイズ: 幅91cm×長さ191×厚さ8cm もしくは下記サイズ、質量を満たすもの サイズ: 幅88~91cm×長さ191~195cm 厚さ: 最大厚15cm以下、最小厚7cm以上 質量: 19kg以下

※仕様変更・追加などによりこの取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。


サイドレール、ベッド用グリップの組み合わせ

正しい組み合わせ

●ベッド用グリップとサイドレールR DBの組み合わせ時のすき間

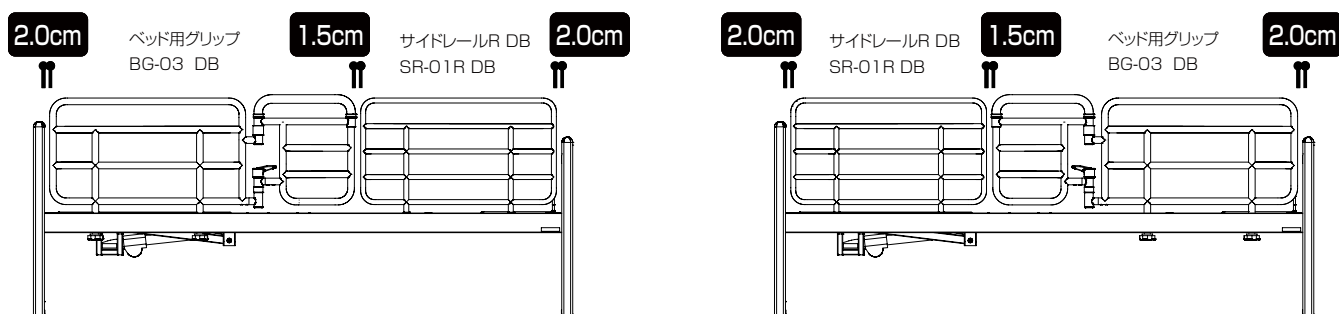


●サイドレールR DBどうしの組み合わせ時のすき間

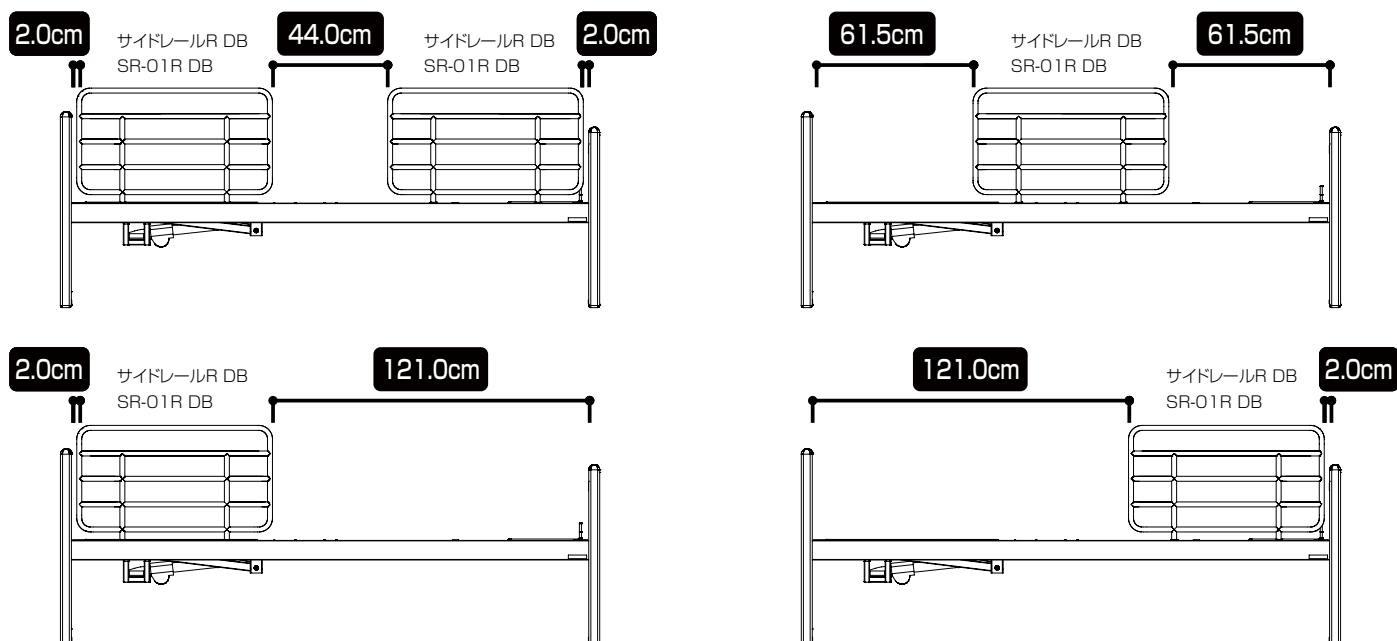

誤った組み合わせ

下記の誤った組み合わせでご使用になると、意図せぬ隙間の発生によりけがをする恐れがあります。

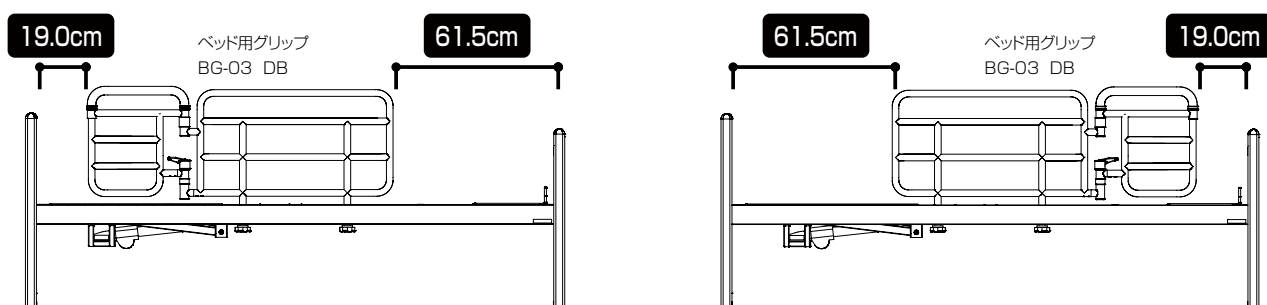

保証とアフターサービス

1.保証書

保証書は必ず『販売店名・お買い上げ日』などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より2年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品名・品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、お買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

取扱説明書の9ページ「故障かな?と思ったら」にしたがって調べてください。それでも直らないときは、ベッドの電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店までご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- 品名・品番
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容 (できるだけくわしく)
- お名前・ご住所・お電話番号

■消耗部品について

- 手元スイッチは消耗部品です。

【保証期間内は】

保証書の明記内容にもとづき、無償で修理いたします。
ただし保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
くわしくは保証書をご覧ください。

【保証期間が過ぎているときは】

修理によって使用できる製品については、
ご要望により有償で修理いたします。

商品品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら
お買い上げ販売店または下記までご連絡ください。

株式会社 グランツ

営業時間 : 平日9:00～18:00(土曜日のみ17:00迄)
休業 : 日曜・祝日・第2.3.4.5土曜日
〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

フリーダイヤル

 **0120-930287**

メモ

メモ



保証書

販売店の方へのお願い

お買い上げ日および貴店のお名前、ご住所、お電話番号を必ずご記入ご捺印した上で、お客様にお渡しください。

品 名 (品 番)	レンクル 1モーターベッド(PA-9512)
保 証 期 間	お買い上げ日より2年間
お 買 い 上 げ 日	年 月 日

お客様

お 名 前	様
ご 住 所	〒 ()

販売店

店 名	
住 所	〒 ()

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書・本製品注意シール等に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には必ず本書をご提示ください。弊社からの出張修理の場合には、別途費用(旅費・技術料)をご負担いただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動時の落下・衝撃などによるお取り扱いが不適当なため生じた故障および損傷。
 - 火災・地震・風水害・落雷、その他天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - ご使用にともなう傷・汚れ等の経年変化および消耗品の交換。
 - 本書にお買い上げ年月日・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 ●This warranty is valid only in Japan.
本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書をもとにした期間、条件において無償修理をお約束するものです。
したがってこの保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。


株式会社 グランツ

〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

グランツ製 在宅介護用電動ベッド専用

取扱説明書 サイドレールR DB

保管用

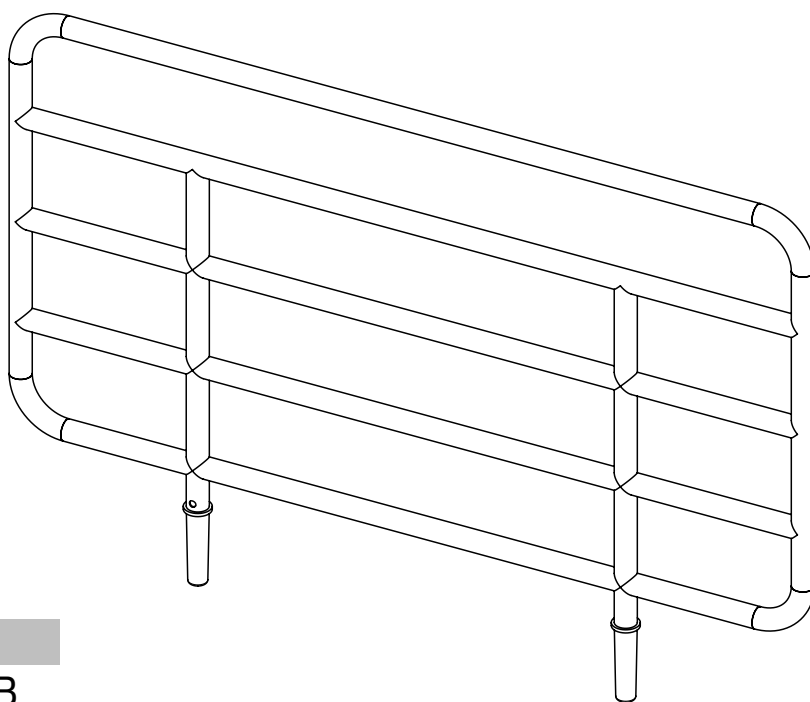

●サイドレール SR-01R DB

このたびは、サイドレールをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- 改良などによりこの「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 製品を他の人に譲渡される場合は、この「取扱説明書」も一緒にお渡してください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

【販売店または、専門業者の方へのお願い】
この「取扱説明書」は必ず療養される方か介護される方へお渡してください。

使用目的

●このサイドレールは、ベッドサイドに取り付けて使用し、ベッドをご使用されている方の転落防止および寝具の落下をふせぐことを目的としています。

もくじ

■ 使用目的／もくじ	1
■ 安全上のご注意	2～4
■ 各部のなまえ／開梱と部品の確認	5
■ 組み合わせ	6
■ 取り付け.....	7
■ 定期点検とお手入れ／仕様	8
■ 保証とアフターサービス	9
■ 保証書	裏表紙

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくため、また、ご利用者様や他の人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分してます。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 **警告** 人が生命にかかわるけがまたは重傷を負う可能性が想定される内容

 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示
の例：



記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。



記号は、**禁止**の行為を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



必ず守る

●マットレスは以下の適合マットレスをご使用ください。これ以外のマットレスを使用するとマットレス上面からサイドレールの上面までの距離が低くなって、寝返りや体位変換のときに転落の原因となります。

※適合マットレス B-287、MT-02、MT-05、MT-06

サイズ:幅91cm×長さ191×厚さ8cm

もしくは下記サイズ、質量を満たすもの

サイズ：幅88～91cm×長さ191～195cm

厚さ：最大厚15cm以下、最小厚7cm以上

質量：19kg以下

●サイドレールを持ってベッドを動かさないでください。変形・破損およびけがの原因となります。

●サイドレールは正しく設置してください。しっかりと差しこまれていなかったり、片側のみの差しこみなどの不正な設置はサイドレールがはずれるなどして、けがをするおそれがあります。

●以下の方がご使用の際は、付き添いの方が取り付けをしてください。身体が不自由な方や意志表示ができない方がご使用になる場合は付き添いの方が取り付けてください。誤った取り付け方をすると重大な事故につながります。

警告



禁止

- 頭や手足をサイドレールのすき間に入った状態で手元スイッチを操作しないでください。すき間にはさまれて重大な事故の原因となります。特にベッド上で予測できない行動をとられる方や体位を自分でたもてない方には十分ご注意ください。
- ベッド本体や他の適合周辺機器とのすき間に注意してください。ベッド本体や他の適合周辺機器とのすき間も発生します。頭や手足をはさまないように十分注意してください。
- 手元スイッチやコードのはさみこみに注意してください。ベッドの背あげ、脚あげのときに、サイドレールとベッド本体のすき間に手元スイッチやコードがはさまらないように注意してください。
- サイドレールに腰かけたり、ぶらさがったりしないでください。変形・破損およびけがの原因となります。
- 12歳以下のお子さまや認知症の方などには十分に注意してご使用ください。ベッドの操作は必ず付き添いの方がされるようにし、12歳以下のお子さまや認知症の方がベッドをご使用されているときは、はさみこみ事故防止のためサイドレールをベッドからとりはずしておくなどしてください。
- お子さまをサイドレールで遊ばせないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 本製品は乳幼児やお子さま向けに設計されていません。サイドレールのすき間などのはさまれてけがをするおそれがあります。
- サイドレールに貼られているシールは、はがさないでください。ご使用時のときの注意および製造番号の表示がされており、はがしてしまうと故障時に的確な対応ができなくなるおそれがあります。
- ベッドの近くでストーブなどの熱器具は使用しないでください。守らないと変質・変形・火災の原因となります。
- 故障の原因となりますので、次のような場所への設置はさけてください。
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・冷暖房による冷氣や暖気が直接あたる場所
 - ・過度の水蒸気や油蒸気のかかりやすい場所
 - ・高温、多湿、低温、乾燥した場所
 - ・ほこり、煙、塩分、イオウ分、腐食性物質などの多い場所
 - ・換気の悪い場所
 - ・振動や衝撃のある場所
- 手元スイッチ(リモコン)のコードをサイドレールに巻きつけしないでください。コードが傷み、故障の原因となります。
- サイドレールをまたいだり上から乗り降りしないでください。破損や重大な事故の原因となります。


注意

- 介助の際はサイドレールにあたらないようご注意ください。介助される方の体位変換や介助する方が動くときにサイドレールにあたるとけがをするおそれがあります。
- サイドレール使用時もベッドからの転落にご注意ください。サイドレールのすき間から転落し、けがをするおそれがあります。万が一の転落にそなえてベッドを低くしたり床にクッションを敷いてください。
- ベッドへの移乗の際はサイドレールの引っかかりやはさみこみにご注意ください。
- 定期的に点検してください。定期点検のページを参照ください。
- 新しいうちは、素材のにおいが気になる場合があります。そのときは、お部屋の換気を十分におこなってください。
- ベッド本体や他の適合周辺機器とのすき間に注意してください。サイドレールのすき間だけでなく、ベッド本体や他の適合周辺機器とのすき間も発生します。これらのすき間に身体の一部(特に頭や首など)がはさまれて、けがをするおそれがあります。下記の項目にご注意ください。
 - ・サイドレールの内部のすき間
 - ・サイドレールとサイドレールのすき間
 - ・サイドレールとヘッドボードまたはフットボードとのすき間
 - ・サイドレールとボトムまたはマットレスとの高さ方向のすき間
 - ・サイドレールとボトムまたはマットレスとの幅方向のすき間
 - ・背あげまたは脚あげされているボトムとサイドレールとのすき間
- 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分ご注意ください。

サイドレールの突起に衣類などがからまないように注意してください。

- 衣類などがからまった状態でベッド操作すると、衣類などが引っばれるなどしてけがをするおそれがあります。
- ベッドの乗り降りなどの際に転倒して、けがをするおそれがあります。

各部のなまえ

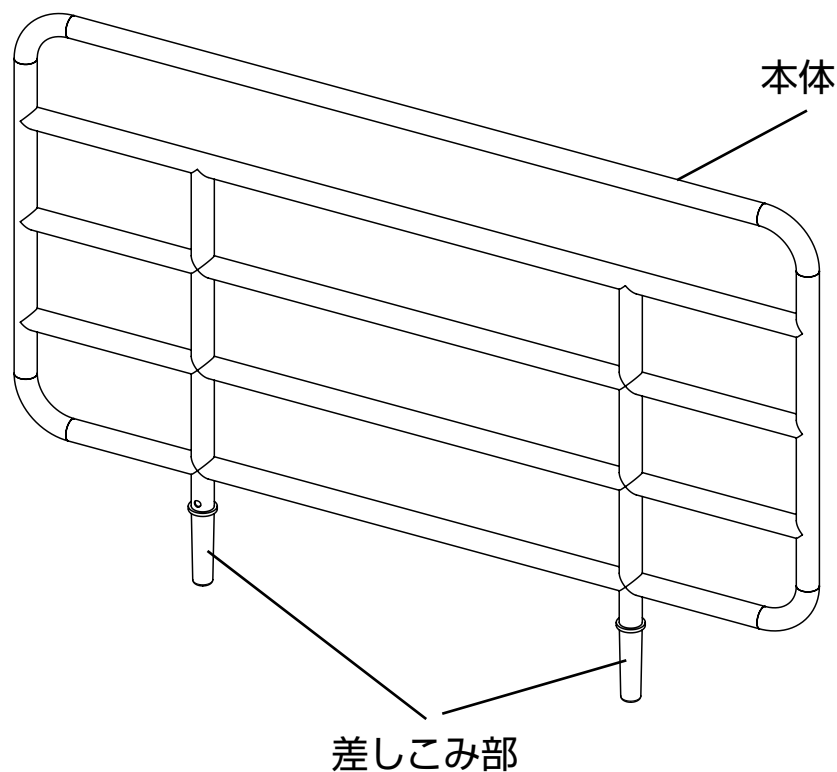

※形状は仕様変更によりイラストと異なる場合があります。



開梱と部品の確認

●開梱後に以下の部品がすべてそろっていること、破損していないことを確認してください。
万一、部品の不足・破損があった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

梱包箱
(1-1)

サイドレール



取扱説明書、
保証書(本書)×1
サイドレール×2

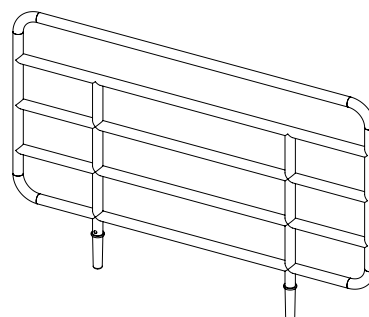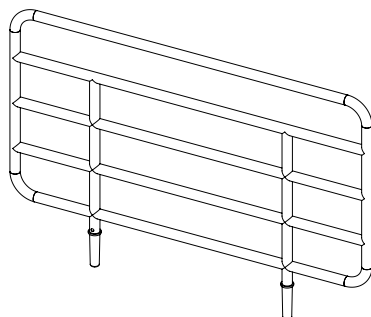

取り付け

サイドレールは4カ所に取り付けられます。取り付け方法は下図のとおりです。

- サイドレールを手で上からまっすぐ差しこんでください。
傾けると引っかかって入りにくくなります。
- 取りはずすときはゆっくりとまっすぐ引き抜いてください。
傾けると引っかかって抜けにくくなります。

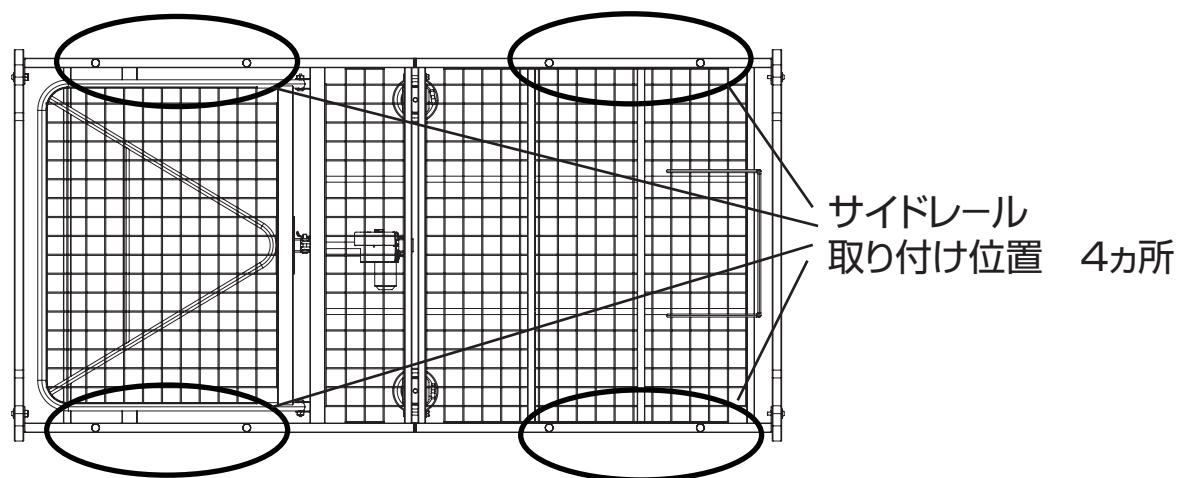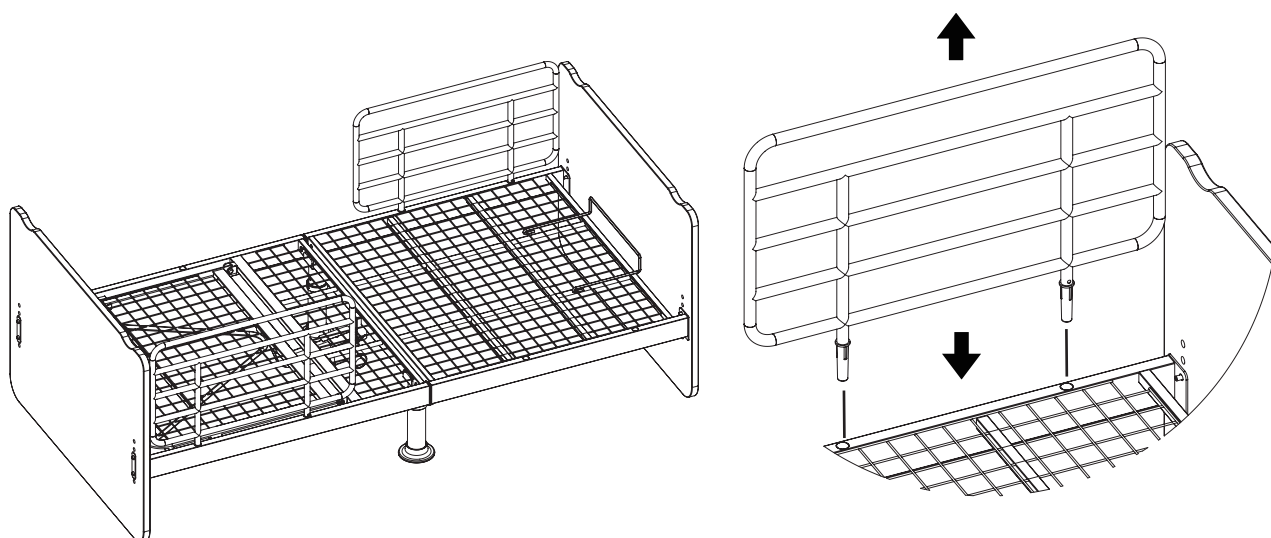

注意



必ず守る

●サイドレールの差しこみ部は必ず両方とも差しこんでください。片側だけ差しこんで使用すると変形、破損もしくは抜け落ちによるけがの原因となります。

定期点検とお手入れ

定期点検

- 安全にご使用いただくために、1ヵ月に1回は定期的に点検してください。
ご使用の回数や環境などにより、製品は摩耗・劣化が進みます。
定期的に変形・破損の有無などを点検してください。
- 異常が認められた場合やくわしい点検をご希望されるときは、販売店へご連絡ください。

お手入れ

●汚れを落とすとき

以下①～③の手順でおこなってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼってふきます。
- ②水でひたした布をよくしぼって洗剤分をふきとります。
- ③乾いた布で残った水分を十分ふきとり、水分を残さないようにします。

●消毒するとき

以下の消毒剤を指定の濃度または消毒剤の取扱説明書にもとづきご使用ください。

・消毒用エタノール ・オスバン ・ハイアミン ・ヒビデン ・ミルトン


※オゾン殺菌器、オートクレープ滅菌器などには対応していません。

⚠ 注意

- シンナー、ベンジン、ガソリン、クレゾールは使用しないでください。
→変色・変質のおそれがあります。
- 消毒剤は指定以外の薬品を使用しないでください。
→破損・変質のおそれがあります。
- 中性洗剤のふき残しがないようにしてください。
→変色や樹脂の部分が割れるおそれがあります。
- サイドレールのお手入れの際は突起部分でけがをしないように注意してください。

仕様

品名 サイドレールR DB
品番 SR-01R DB
質量 2.5kg(1本)
材質 本体:スチールパイプ
(パイプ径 1.9cm)
差しこみ部:樹脂

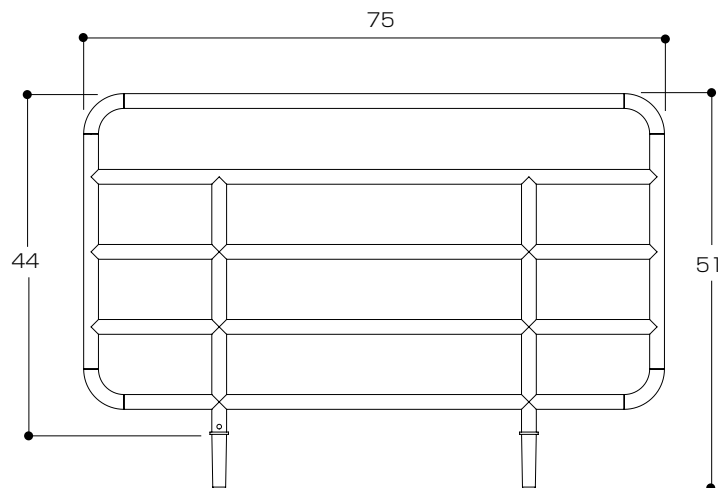

※仕様変更・追加などによりこの取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。
不明な点は販売店までお問い合わせください。

保証とアフターサービス

1.保証書

保証書は必ず『販売店名・お買い上げ日』などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品名・品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、お買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2.修理を依頼 されるとき

販売店または弊社までご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- 品名・品番
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容 (できるだけくわしく)
- お名前・ご住所・お電話番号

【保証期間内は】

保証書の明記内容にもとづき、無償で修理いたします。
ただし保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
くわしくは保証書をご覧ください。

【保証期間が過ぎているときは】

修理によって使用できる製品については、
ご要望により有償で修理いたします。

商品品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら
お買い上げ販売店または下記までご連絡ください。

株式会社 グランツ

営業時間 : 平日9:00～18:00(土曜日のみ17:00
迄)休 業 : 日曜・祝日・第2.3.4.5土曜日
〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

フリーダイヤル

 **0120-930287**

メモ



保証書

販売店の方へのお願い

お買い上げ日および貴店のお名前、ご住所、お電話番号を必ずご記入後に捺印した上で、お客様にお渡してください。

品 名 (品 番)	サイドレールR DB(SR-01R DB)
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お 買 い 上 げ 日	年 月 日

お客様

お 名 前	様
ご 住 所	〒 ()

販売店

店 名	
住 所	〒 ()

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書・本製品注意シール等に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には必ず本書をご提示ください。弊社からの出張修理の場合には、別途費用(旅費・技術料)をご負担いただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動時の落下・衝撃などによるお取り扱いが不適当なため生じた故障および損傷。
 - 火災・地震・風水害・落雷、その他天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - ご使用にともなう傷・汚れ等の経年変化および消耗品の交換。
 - 本書にお買い上げ年月日・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 ●This warranty is valid only in Japan.
本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書をもとにした期間、条件において無償修理をお約束するものです。
したがってこの保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

株式会社 グランツ

〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10